



## APLICACIÓN LAUDA COMMAND

Control intuitivo de los equipos con smartphone, tableta y PC


# Aplicaciones LAUDA Command y Command Professional

## Regulación de temperatura en la punta de los dedos

Experimente una nueva era del control de equipos, con una mayor eficiencia y con la facilidad de uso como prioridad. La aplicación LAUDA Command es su compañero de confianza para una integración perfecta y un rendimiento optimizado. El lugar de instalación y el manejo son independientes entre sí y permiten por tanto el acceso desde cualquier lugar. La aplicación LAUDA Command Professional ofrece opciones de ajuste adaptadas, funciones de análisis ampliadas y ambiciosas opciones de control.

### Descarga

Aplicación disponible de manera gratuita en:

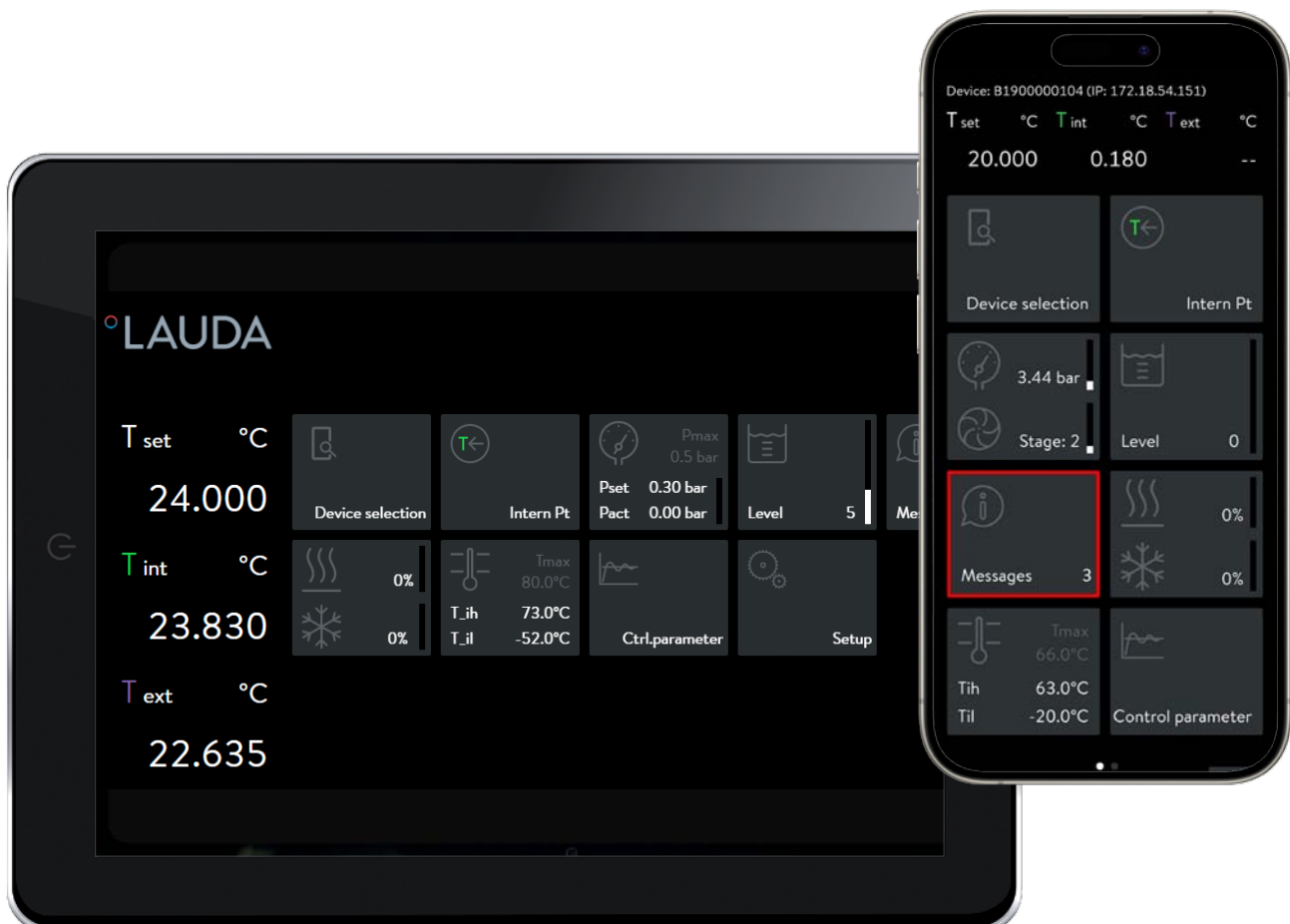

# Aplicación LAUDA Command

## Regulación precisa de temperatura en una sola mano

Ya sea desde el smartphone, tableta o PC, la aplicación (iOS, Windows, Android) permite en todo momento y desde cualquier lugar dentro de la red de la empresa ajustar los valores de temperatura, iniciar o detener procesos y llevar a cabo ajustes individuales para los equipos LAUDA.



### Aplicación LAUDA Command (gratuita)

- **Selección de equipo:** selección sencilla del equipo utilizado
- **Valor nominal de temperatura:** introducción directa del valor nominal de la temperatura ( $T_{set}$ )
- **Modificación de parámetros:** según las aplicaciones, es posible establecer individualmente magnitudes controladas, parámetros de regulación, parámetros de nivel, magnitudes de ajuste y límites de temperatura
- **Mensajes:** todas las alarmas, mensajes de error y advertencias que hayan podido activarse en el equipo están disponibles en la aplicación
- **Standby/funcionamiento:** encendido y apagado del equipo (standby) gracias al control intuitivo

Líneas de equipos	Vers. incrustada	Información adicional
Integral IN	de 1.52	-
Variocool	de 1.76	Se necesita Ethernet Modul Advanced (LRZ 930)

Aplicación LAUDA Command

# Aplicación LAUDA Command Professional

## Excelencia en el control de la temperatura

Las funciones ampliadas, que superan a las de la aplicación LAUDA Command, permiten reconocer tendencias, llevar a cabo adaptaciones y garantizar una elevada reproducibilidad de los procesos de regulación de temperatura con mayor facilidad. La aplicación LAUDA Command Professional presenta como elementos principales la creación y gestión de perfiles de regulación de temperatura controlados por tiempo, visualización intuitiva de los datos de temperatura, así como un registro ininterrumpido de datos.



### Aplicación LAUDA Command Professional

- **Todas las ventajas de la aplicación LAUDA Command**
- **Programador:** el programador permite programar, memorizar e iniciar un programa de temperatura en función del tiempo. Se pueden guardar hasta 5 programas diferentes
- **Gráfico de temperatura:** las variaciones de temperatura pueden verse mediante gráficos y exportarse como archivos de imagen
- **Registro de datos:** los parámetros disponibles en el gráfico de temperatura pueden registrarse y exportarse para analizarlos posteriormente o para crear informes

Número de pedido: D000089

Línea de equipos	Vers. incrustada	Información adicional
Integral IN	de 1.57 en adelante	-

Aplicación LAUDA Command Professional



Controle su solución de regulación de temperatura LAUDA directamente desde su terminal móvil o PC. La aplicación LAUDA Command se instala rápidamente y es fácil de configurar.



El acceso a los equipos está protegido con los más altos estándares de seguridad, como la autenticación de dos factores y HTTPS.



La compatibilidad de la aplicación se seguirá ampliando para más líneas de equipos. Se lleva a cabo un continuo desarrollo de funciones adicionales innovadoras para ampliar la funcionalidad de la aplicación.

Iniciar su equipo de termorregulación LAUDA directamente desde un terminal móvil u ordenador: con la aplicación LAUDA puede configurar y controlar de manera cómoda y variada su equipo.

